


Руководство
по установке ПО
и драйверов


для радиовизиографа Mercury HDR



1-1. Откройте каталог "Software" и запустите установочный файл " HandyDentist_3.01.00(2015122201)"

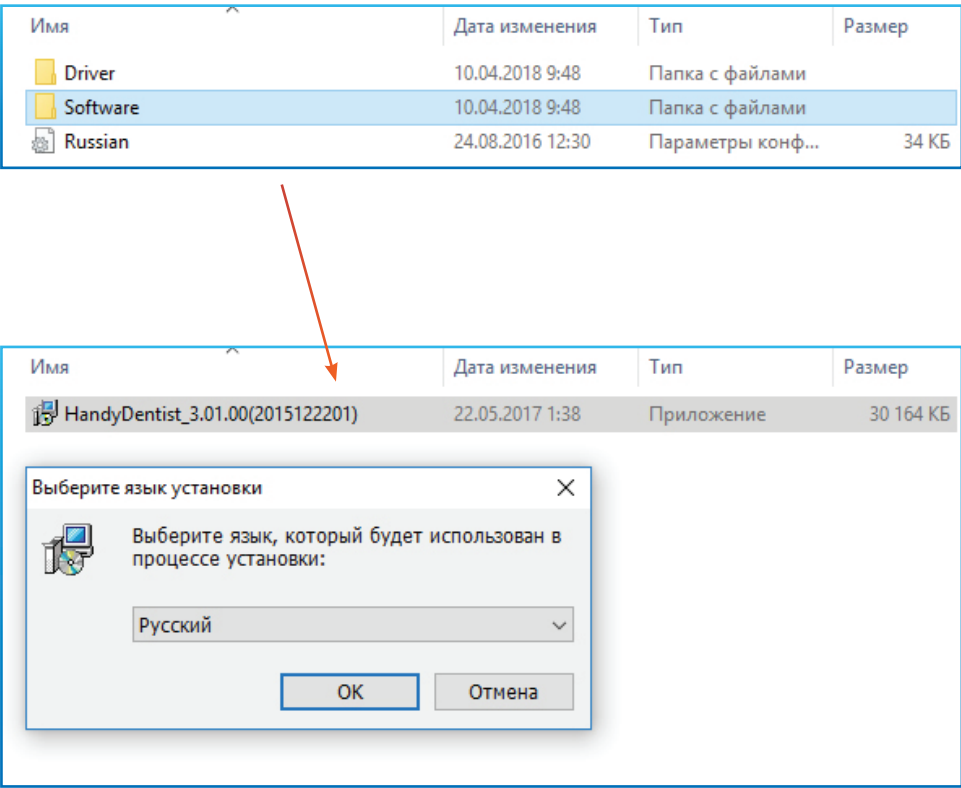


1-2. Программа установки выведет путь, по которому будет установлено ПО
! Запомните этот путь. Он пригодится для калибровки и нормальной русификации

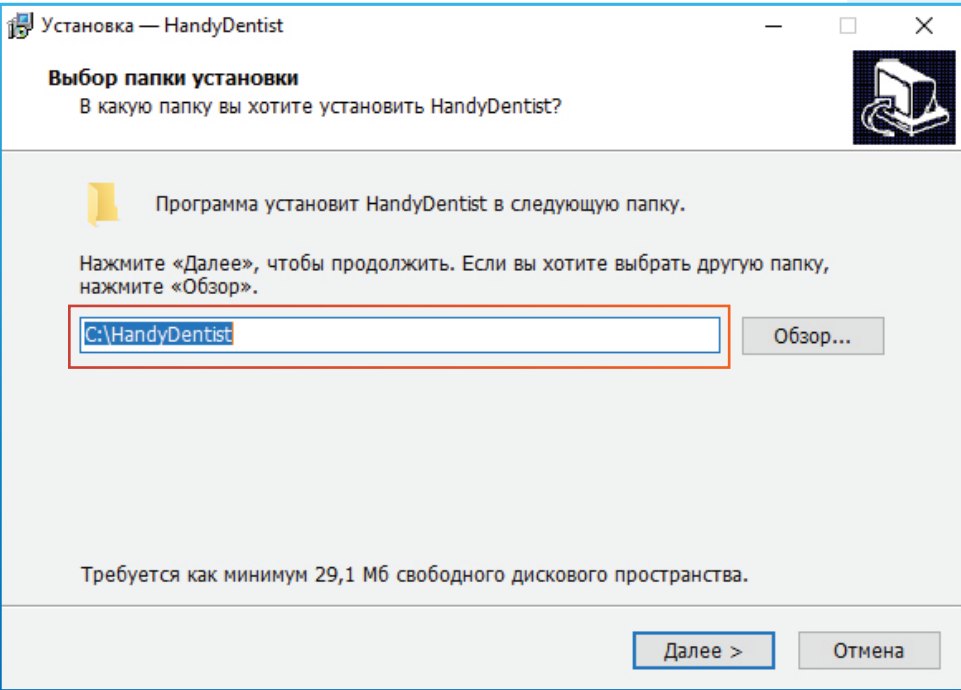

1-3. Далее просто нажимайте на подтверждающие кнопки

2-1. Подсоедините датчик к USB-разъему, затем откройте каталог "Driver" и запустите установочный файл "HDR1xx_2xx Driver 1.0.0.2(2014051501)"


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Driver	10.04.2018 9:48	Папка с файлами	
Software	10.04.2018 9:48	Папка с файлами	
Russian	24.08.2016 12:30	Параметры конф...	34 КБ

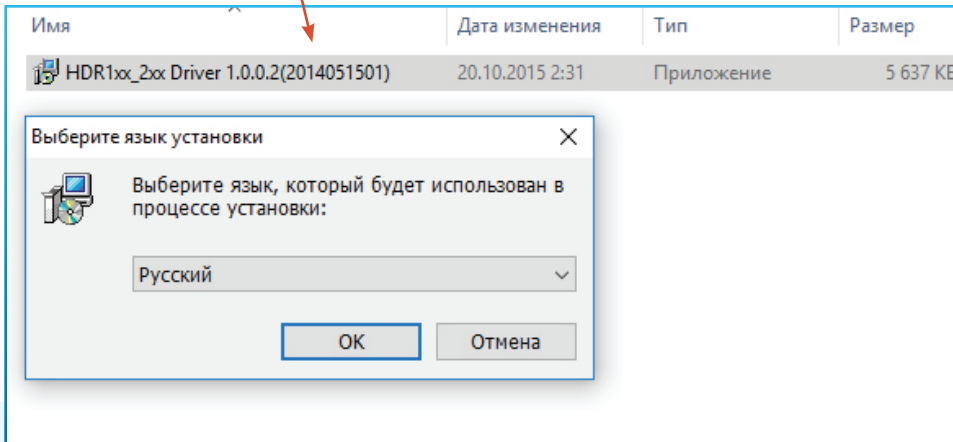


2-2. Программа установки НЕ устанавливает драйвер в систему, а распаковывает драйверы в каталог C:\Program Files (x86).

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Adobe	20.09.2018 9:53	Папка с файлами	
AIMP	13.03.2018 9:36	Папка с файлами	
ArchiMEDSuitImageTD	04.05.2018 11:35	Папка с файлами	
Common Files	15.05.2018 11:08	Папка с файлами	
Corel	17.07.2018 14:04	Папка с файлами	
GIGABYTE	05.03.2018 14:59	Папка с файлами	
Google	05.03.2018 16:24	Папка с файлами	
gs	06.03.2018 14:03	Папка с файлами	
HDR1xx_2xx Driver	20.03.2018 15:57	Папка с файлами	
Internet Explorer	13.09.2018 23:08	Папка с файлами	
Microsoft LifeCam	15.05.2018 11:07	Папка с файлами	


2-3. Теперь необходимо драйверы установить через диспетчер устройств

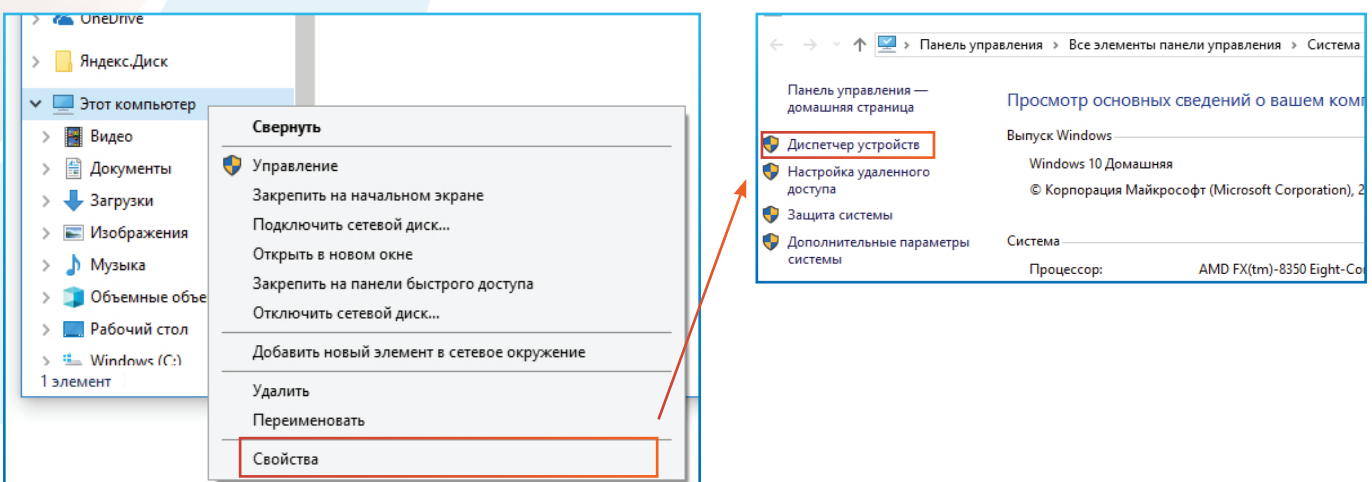


2-4. В диспетчере устройств найдите "HDR5xx/6xx Digital Intraoral Imaging Sensor".
Рядом с названием будет предупреждающий значок, так как драйвер еще не установлен

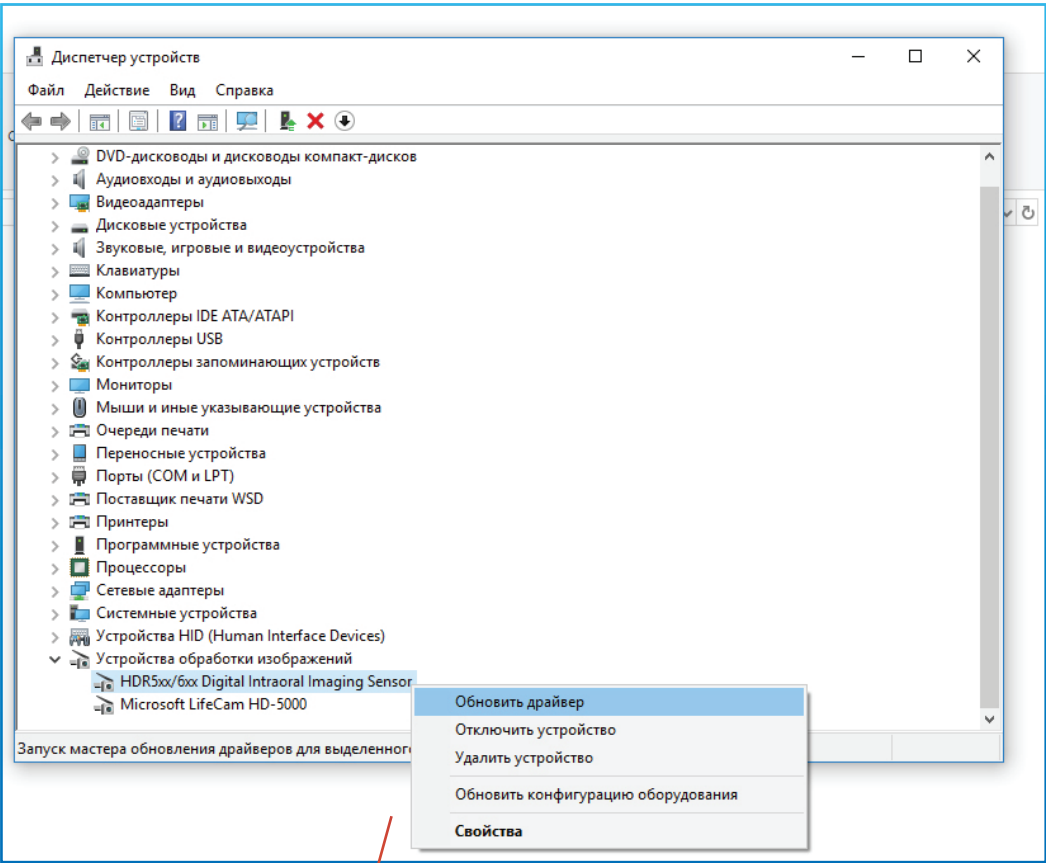

2-5. Далее выберите "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере"

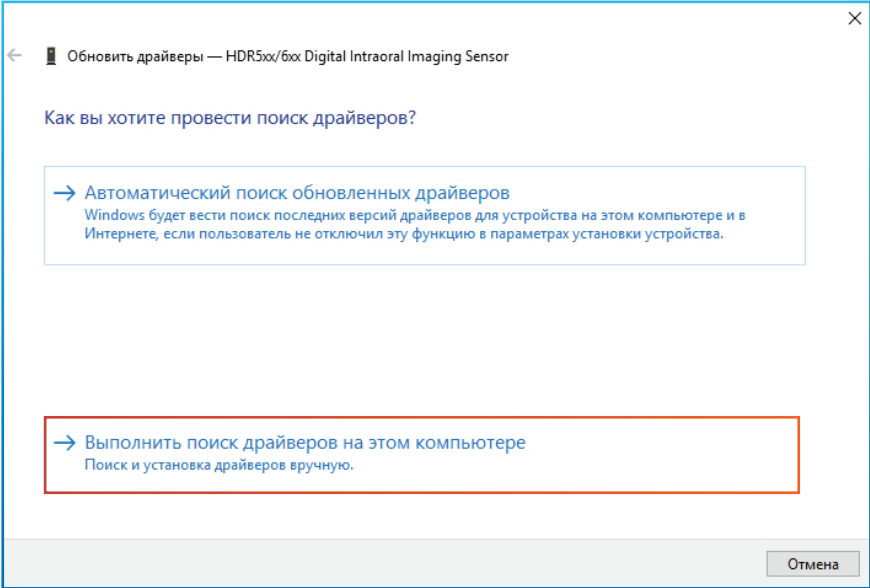


2-6. В поле "Обзор" выберите тот самый путь, про который было упомянуто выше в п. 2-2
C:\Program Files (x86)\HDR1xx_2xx Driver. Затем нажмите "Далее" и дождитесь окончания установки

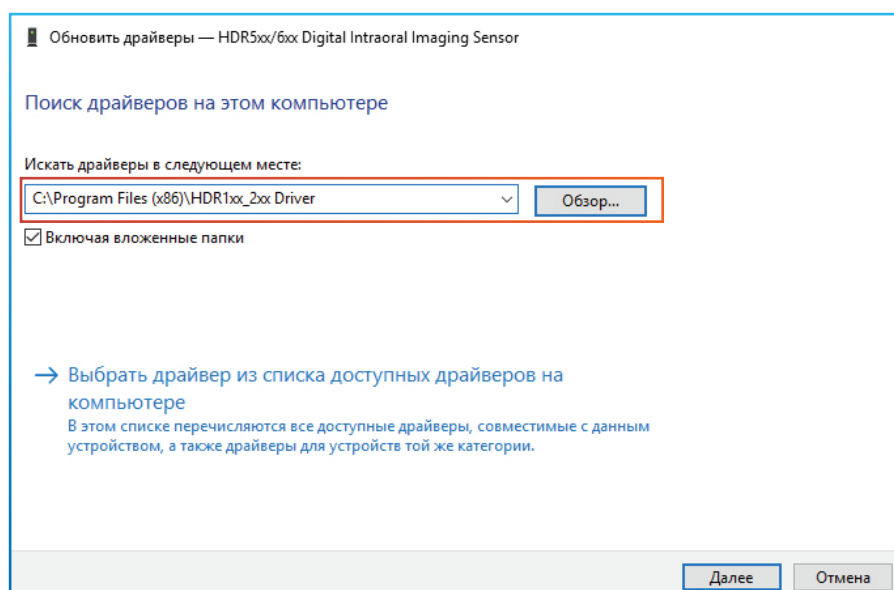


Калибровка сенсора


3-1. На USB-носителе из комплекта откройте каталог "Calibration File"

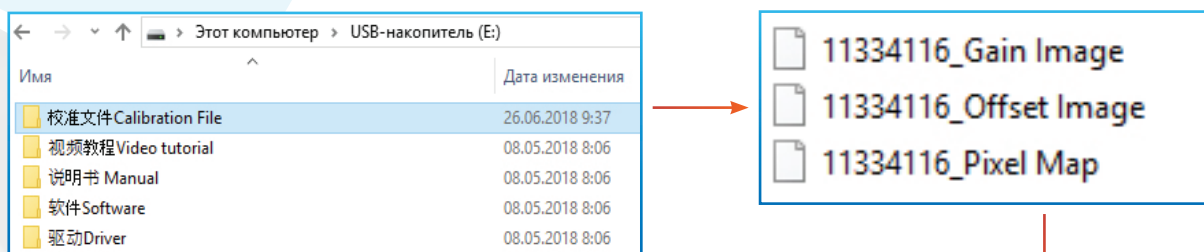

3-2. Скопируйте калибровочные файлы в каталог **C:\HandyDentist\Sensor**

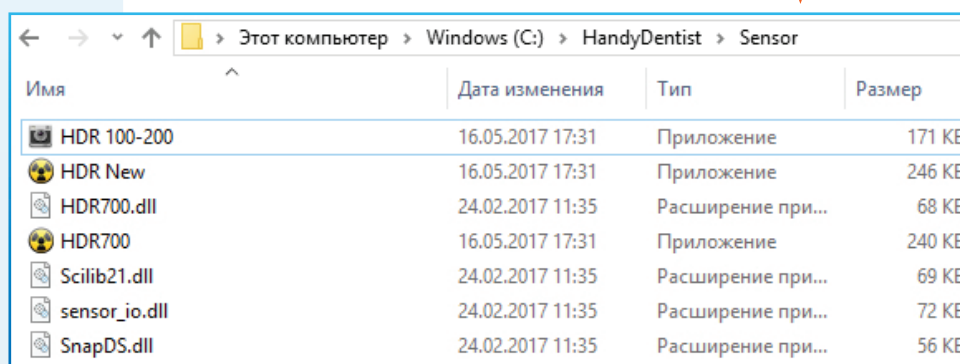


4-1. Для исправления "Кривой" русификации на "Ровную" **скопируйте с заменой** файл "Russian" в каталог **C:\HandyDentist\Languages**

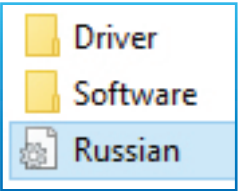

← → ▾ ↑			Этот компьютер > Windows (C:) > HandyDentist > Languages		
Имя		Дата изменения		Тип	
	Czech	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	English	11.05.2017 10:51		Параметры конф...	
	French	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	German	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	Hungarian	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	Italian	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	Polish	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	Portuguese	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	Russian	24.08.2016 12:30		Параметры конф...	
	Spanish	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	Turkish	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	한국어	24.02.2017 11:35		Параметры конф...	
	简体中文	11.05.2017 10:48		Параметры конф...	
	繁體中文	08.05.2017 9:25		Параметры конф...	

5-1. В программе зайдите в меню "Помощь" - "Регистрация"

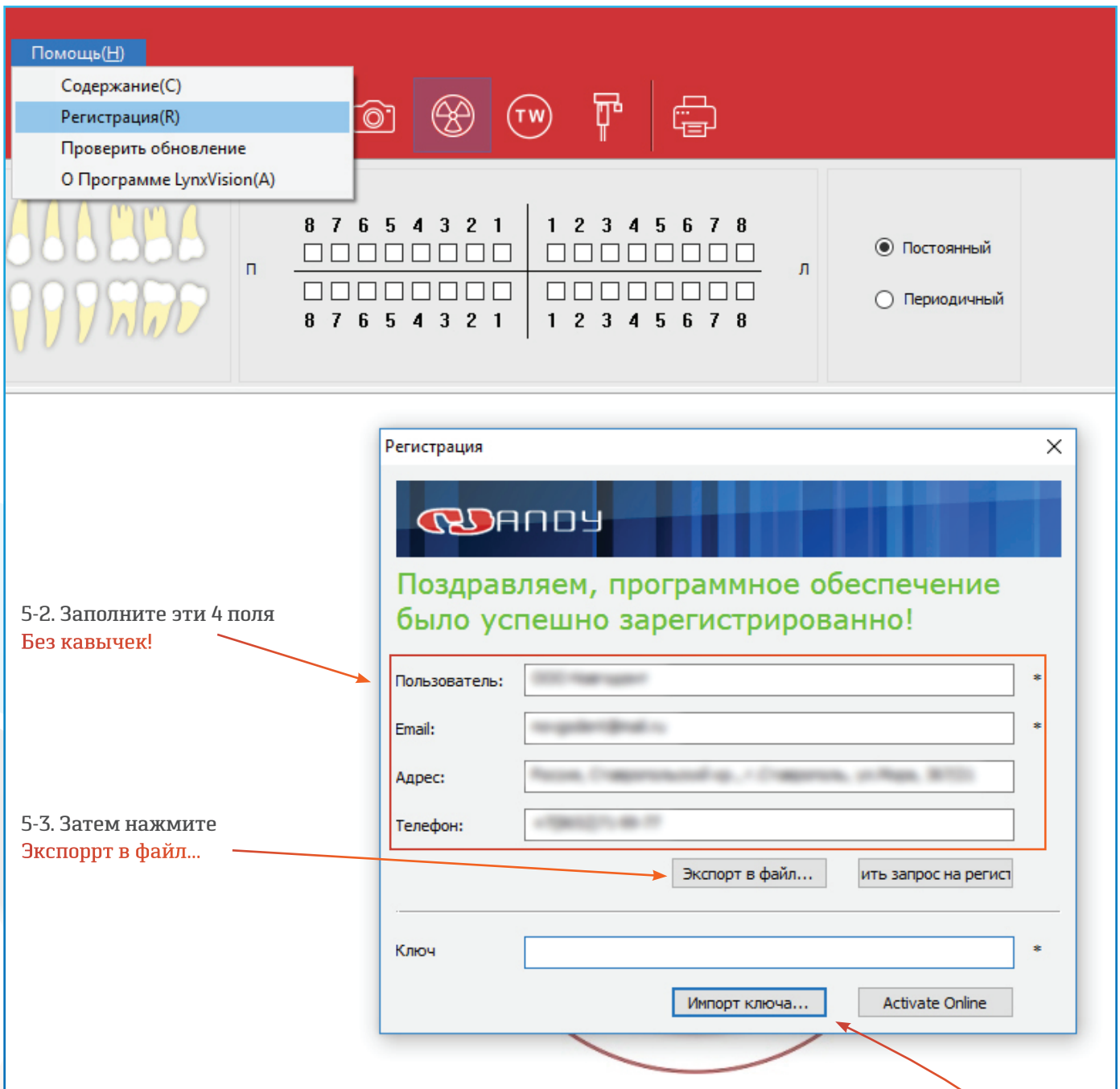

5-4. Экспортированный файл необходимо отправить производителю по электронной почте support@handycreate.com с указанием темы "HandyDentist registration file"

5-5. В ответном письме от производителя вы получите активационный файл (ключ), который разблокирует лицензию ПО. Скачайте его на свой компьютер и активируйте ПО.

После успешной активации ключа в диалоговом окне Вы увидите текст:

Поздравляем, программное обеспечение было успешно зарегистрировано!

WWW.NOVGODENT.RU



+7 (8652) 525-888



novgodent@mail.ru



г. Ставрополь

с. Верхнерусское, ул. Батайская, 24г

