



## **БУНКЕР ДЛЯ ГИПСА модель БУНКЕР 5.0 М**



**Этикетка  
АВЕ 417.000.000 ЭТ**

для механической подачи гипса  
в гипсовочных и литейных лабораториях

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Бункер для гипса БУНКЕР 5.0 М** (далее - БУНКЕР) предназначен для механической подачи гипса.

БУНКЕР применяется в гипсовочных и литейных лабораториях.

**1.2** Рекомендуется эксплуатировать совместно со столом универсальным лабораторным СУЛ 9.1 ГИПС (далее – стол).

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

### 1.4 Основные характеристики

максимальная загрузка гипса ..... 5 кг

влажность гипса, не более ..... 5%\*

габариты..... 160x260x360 мм

масса (без гипса), не более ..... 3,3 кг

\* - для равномерной подачи рекомендуется засыпать в БУНКЕР гипс с влажностью не более 5%, иначе возможны перебои в подаче гипса.

### 1.5 Комплектность

ШТ

БУНКЕР с крышкой..... - 1

Кронштейн..... - 1

Скоба для навешивания..... - 2

Винт М 5×10..... - 4

Гайка М 5..... - 4

Шайба 5 гровер..... - 4

Шайба 5..... - 4

Саморез п-круг 4,8×50..... - 4

Дюбель 8×50..... - 4

Этикетка АВЕ 417.000.000 ЭТ

☒ - емкость (500 мл) с трубкой и мерным градуированным контейнером (50 мл), для ручного дозирования воды при заливке гипса и паковочных масс **ДОЗАТОР 0.5 ПЛЮС**

☒ - поставка по дополнительной заявке

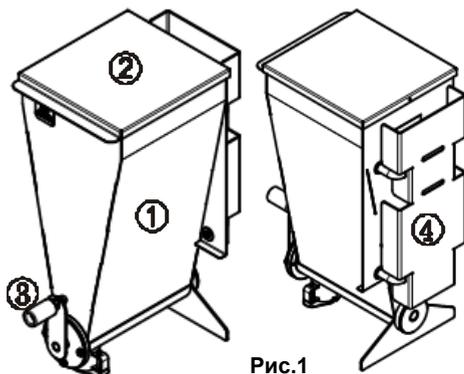


Рис.1

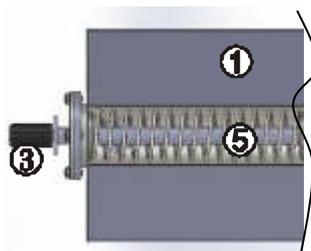


Рис.2 Вид сверху (без крышки)

## 2 УСТРОЙСТВО (рис. 1-4)

1 – короб

2 – крышка

3 – ручка с маховиком механизма подачи гипса

4 – кронштейн

5 – пружина

6 – патрубок подачи гипса

7 – крышка патрубка

8 – скоба для навешивания

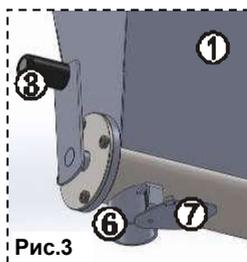


Рис.3

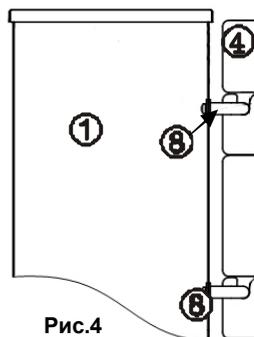


Рис.4

### 3 РАБОТА (рис.1-7)

Установить ручку (3) из транспортного положения в рабочее, как показано на рис.1.

Установить скобы (8) для навешивания БУНКЕРА в соответствующие отверстия снаружи задней стенки, крепеж установлен в скобах.

Закрепить кронштейн (4) через горизонтальные отверстия, рис.5, на стену дюбелями 8×50 и саморезами 4,8×50, или на заднюю стенку стола винтами М 5×16, шайбами 5, гайками М 5, рис.6.

Засыпать гипс. Например, поставить БУНКЕР на пол и заполнить загрузочный отсек.

Скобами (8), размещенными на задней стенке, навесить БУНКЕР в пазы кронштейна.

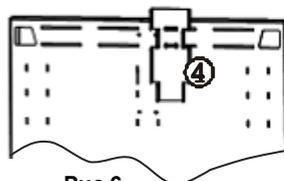


Рис.6

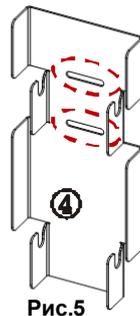


Рис.5

При вращении ручки (3) и открытой крышке (7) происходит равномерная подача гипса: витки пружины (5) перемещают гипс по нижней части короба (1) в патрубков (6).

Для точной дозировки гипса рекомендуется наполняемую из БУНКЕРА емкость устанавливать на весы.

Пример размещения БУНКЕРА на столе СУЛ 9.1 ГИПС приведен на рис.7.

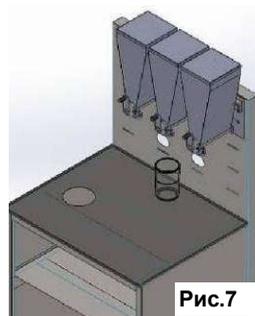


Рис.7

#### ВНИМАНИЕ!

Не промывать бункер водой во избежание выхода из строя.

Использование низкосортных материалов, повышенная влажность воздуха в помещении, влажный гипс, попадание посторонних предметов могут привести к снижению производительности или прекращению дозирования.

Не рекомендуется длительное хранение гипса в БУНКЕРЕ. При проявлении признаков слеживаемости сократить время нахождения гипса в БУНКЕРЕ, пересыпая и храня гипс в герметичной емкости.

### 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости очищать внутреннюю поверхность БУНКЕРА, а также протирать наружные поверхности от пыли влажной мягкой тканью.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель БУНКЕР 5.0 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.