

Фокус на главном

 **SmartLite**[®]
FOCUS



К лучшей стоматологии

DENTSPLY

ФОКУС НА ГЛАВНОМ


- Надёжная полимеризация
- Удобный доступ к полости
- Постоянная готовность к работе



Надёжная полимеризация

SmartLite Focus обеспечивает однородный, сфокусированный луч света.

В связи с этим, полимеризация большинства материалов DENTSPLY может быть проведена с расстояния до 8 мм.^{1, 2, 3}

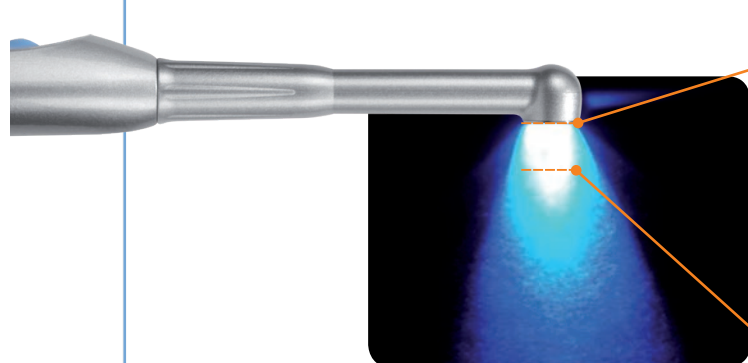

[мм]

0
—
2
—
4
—
6
—
8



Полимеризация композита
Sezam X топо+ M5
на расстоянии 8мм
(модель Icure)

Полимеризация 4мм
материала (глубина
полимеризации
= 2 мм ISO)

Клинические преимущества

- Надёжная полимеризация на расстоянии
- Пучок света не рассеивается

¹ Руководство SmartLite Focus Curing Guide DENTSPLY


² ISO 4049, Информация по требованию

³ Располагать полимеризационную лампу лучше максимально близко к поверхности пломбы



Доступ к полости

SmartLite Focus имеет эргономичную форму ручки с вращающимся наконечником и одной кнопкой, активизирующей лампу на 20 секунд.

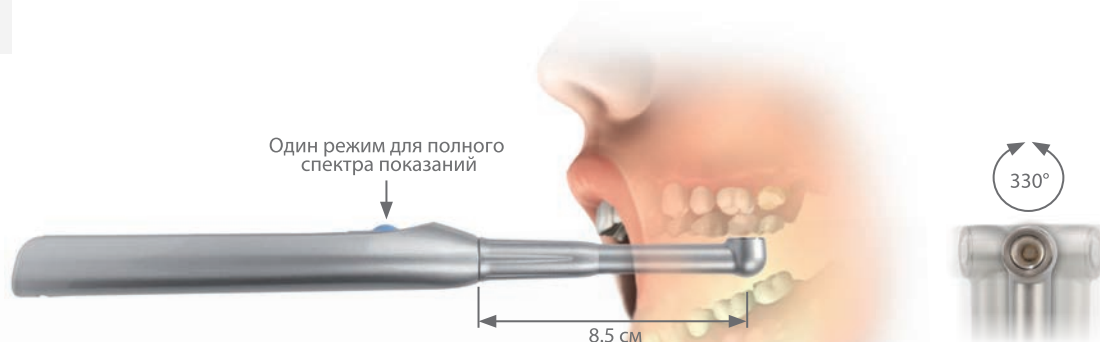

Клинические преимущества:

- Отличный доступ к полости
- Простое управление одним нажатием
- Один режим для прямых и не прямых реставраций



Постоянная готовность к работе

Аккумулятор обеспечивает практически постоянную работу лампы и готов к работе сразу же после распаковки лампы, без необходимости в подзарядке. Сменный аккумулятор обеспечивает стабильную работу даже после длительного хранения .

Специальный режим умной подзарядки Smart Recharge подбирает наиболее подходящий вариант в зависимости от состояния батареи:

• «Автоматический быстрый режим»

Обеспечивает минимум 5 минут работы лампы после 10 минут зарядки (используется, когда аккумулятор практически полностью разряжен, а реставрация не закончена)

• «Стандартный режим»

Полная зарядка устройства менее, чем за 3 часа.

• «Режим ожидания»

Предотвращает перезарядку аккумулятора после достижения им полной емкости.

Клиническое преимущество:

- Непрерывная готовность лампы к работе





Сфокусированный луч света



Попробуйте работу с лампой SmartLite Focus и ощутите концентрированный пучок света с минимумом рассеивания.

Информация для заказа

SmartLite Focus Вводный набор 644.50.020

- 1xSmartLite Focus
- 1xSmartLite Focus зарядное устройство
- 1xSmartLite Focus аккумулятор
- 5xSmartLite Focus защитные экраны
- 300xSmartLite Focus защитные рукава (SmartLite Focus и SmartLite PS)
- 1 x SmartLite Focus Адаптер
- 1x инструкция
- 1x Руководство Material Curing Guide

SmartLite Focus Дополнительный набор 644.50.060

- 1xSmartLite Focus
- 1xSmartLite Focus аккумулятор
- 1x инструкция
- 1x Руководство Material Curing Guide

SmartLite Focus зарядное устройство 644.50.070

- 1xSmartLite Focus зарядное устройство

SmartLite Focus аккумулятор 644.50.021

- 1xSmartLite Focus аккумулятор



SmartLite Focus защитные рукава 644.50.030

- 300xSmartLite Focus защитные рукава (SmartLite Focus и SmartLite PS)

SmartLite Focus защитные экраны 644.50.040

- 5xSmartLite Focus защитные экраны

SmartLite Focus Адаптер 644.50.050

- 1 x SmartLite Focus Адаптер

Dentsply Russia Limited
 Москва, 129090
 Проспект мира, дом 6
 Тел: +7 (495) 988 28 08
 Факс: +7 (495) 988 28 09
 www.dentsplycis.com

K79200077-00 © DENTSPLY DeTrey 07.05.2012

